


Heavy-Duty Animal Clipper with Detachable Blade

• *For Commercial Use Only* •

Instruction Manual

For model numbers:
78006

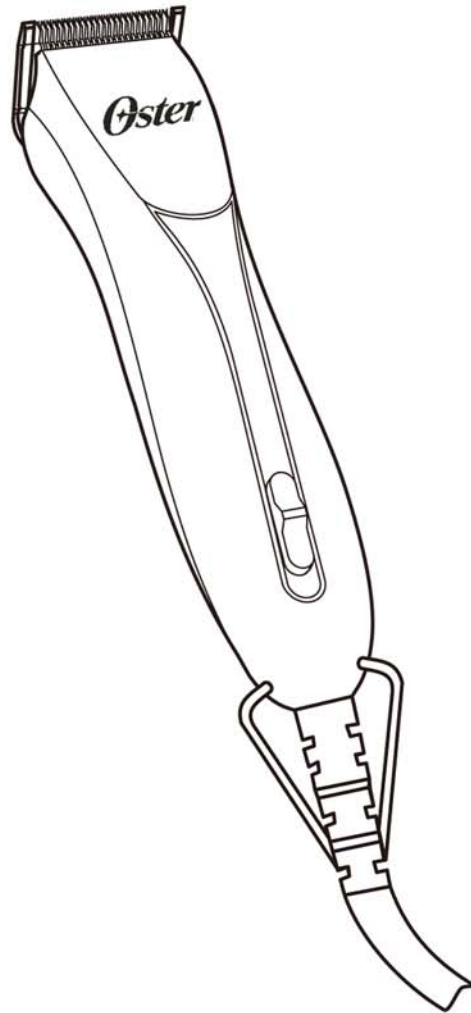

오스타 A6 이발기
한글 사용설명서

OsterTM
Professional Products

안전을 위한 주의사항

DANGER



Commercial Clipper

이발기 전원을 켜기 전에 반드시 본 설명서를 읽은 후 사용하십시오.

전기로 인한 위험 예방

1. 이발기가 물 속에 빠진 경우 가까이 가지 말고 플러그를 뽑아주십시오.
2. 목욕 중에 사용하지 마십시오.
3. 떨어지거나 빠질 수 있는 곳(욕조, 싱크대 등) 주변에 보관하지 마십시오.
4. 물이나 다른 액체류에 닿지 않도록 주의하십시오.
5. 사용후에는 반드시 콘센트에서 플러그를 뽑아 보관하십시오.
6. 이발기를 세척하거나 부품을 조립 및 분리할 때는 반드시 플러그를 뽑아주십시오.

WARNING



Commercial Clipper

이발기 전원을 켜기 전에 반드시 본 설명서를 읽은 후 사용하십시오.

화상, 화재, 감전 및 상해의 위험 예방

1. 이발기의 플러그가 꽂힌 채 놓아두지 마십시오.
2. 유아 및 어린이 또는 환자에 의해 사용되거나 근처에 있는 경우 각별한 주의가 필요합니다.
3. 본 설명서에 따라 이발기 본래의 용도로만 사용하십시오. 제조사로 부터 제공되지 않은 부품을 사용하지 마십시오.
4. 전선, 플러그가 손상되었거나, 제대로 작동하지 않거나, 바닥에 떨어뜨렸거나 물에 닿은 경우 이발기를 작동시키지 마시고 수리를 위해 서비스센터에 맡기십시오.

5. 전선이 뜨거운 표면과 닿지 않도록 주의하십시오.
6. 이발기를 떨어뜨리거나 이발기 속에 이물질이 들어가지 않도록 주의하십시오.
7. 옥외 또는 분무기가 설치되어 있는 곳, 산소가 분출되는 곳에서는 사용하지 마십시오.
8. 손상되거나 부러진 빗 또는 날과 함께 사용하지 마십시오. 피부에 상처를 입힐 수 있습니다.
9. 전원을 끄려면 모든 기능을 "OFF" 로 설정한 뒤 콘센트에서 플러그를 뽑아주십시오.
10. 전선을 본체에 감은 채 보관하지 마십시오. 지속되는 압력으로 인해 전선이 손상되어 감전의 위험을 초래할 수 있습니다.
11. 작동중인 날을 만지지 마십시오.
12. 이발 중에 전선이 꼬이거나 엉키면 전원을 끄고 전선을 펴주십시오.
13. 본 이발기는 털을 이발하거나 다듬는 용도로만 사용하십시오.
14. 이발기에 물기나 습기가 없도록 건조한 상태로 보관하십시오.
15. 연속 작동시간은 20분입니다.
16. 사용중에는 아래와 같은 상황에 놓아두지 마십시오
 - 동물에 의해 손상될 수 있는 경우
 - 날씨에 직접적으로 노출되는 경우
17. 본 이발기는 안전을 책임질 수 있는 감독이 없는 경우 어린이 및 신체가 불편한 사용자 또는 사용 경험이 없거나 이발기에 대한 지식이 없는 사용자에 의해 사용되지 않아야 합니다. 본 이발기가 어린이의 손에 닿지 않도록 주의하십시오.
18. 이 제품은 동물용입니다.

본 설명서를 읽은 후 버리지 말고 보관하십시오.

본 이발기는 긴 전선에 발이 걸려 넘어지거나 말리는 위험을 줄이기 위해 아답터에서 전선 분리가 가능합니다.

별도의 긴 연장선 연결이 가능하며 사용에 익숙한 경우에만 사용하십시오.

- 본 이발기에 제공된 전선과 호환이 가능한 규격의 제품만 사용하십시오.
- 작업대 위에 전선이 늘어뜨려져 잡아당기거나 발에 걸리지 않도록 정리해두시고 어린이의 손이 닿지 않도록 주의하십시오.

기기를 함부로 건드리거나 변경하지 마십시오.

이발기에 관하여

본 이발기는 제조 및 조립과정의 각각의 단계에서 테스트된 제품입니다.

이발기의 수명을 늘리고 사용시 효과를 극대화하기 위해 본 설명서를 따라 오일칠을 하여 사용할 것을 권장합니다.

본 이발기는 3단계의 속도로 사용할 수 있으며 각 단계 모두 효과적인 이발기능을 실행할 수 있습니다. 낮은 단계일수록 날의 열기와 이발량이 감소됩니다.

WARNING




본 이발기를 사용하거나 세척할 때 오스터사에서 제공되지 않은 분무제나 날 세척제, 특히 메틸렌, 클로라이드, 디메틸벤질암모늄클로라이드, 또는 1-1-1 트리클로로에틸렌이 포함되어 있는 물질은 사용하지 마십시오. 이 화학물질들로 인한 손상은 수리 및 보상을 받을 수 없습니다.

이발기 본체 및 부품 파악하기

본 이발기는 여러 부품 및 악세사리가 포함되어 있습니다. 각 부분에 손상이 없는지 확인하십시오. 일부 부품은 오스타 서비스센터에서 구입하실 수 있습니다.

- | | | | |
|---|--------------|---|--------|
| 1 | 이발기 (클리퍼) | 6 | 세척 브러쉬 |
| 2 | On/Off 전원버튼 | 7 | 날 보호캡 |
| 3 | 거치 고리 | 8 | 날 조립체 |
| 4 | 전선 | | |
| 5 | 오스타 전용 세척 오일 | | |

지속적인 제품 업그레이드로 인해 아래 그림에 묘사된 것과 실제 제품에 약간의 차이가 있을 수 있습니다.

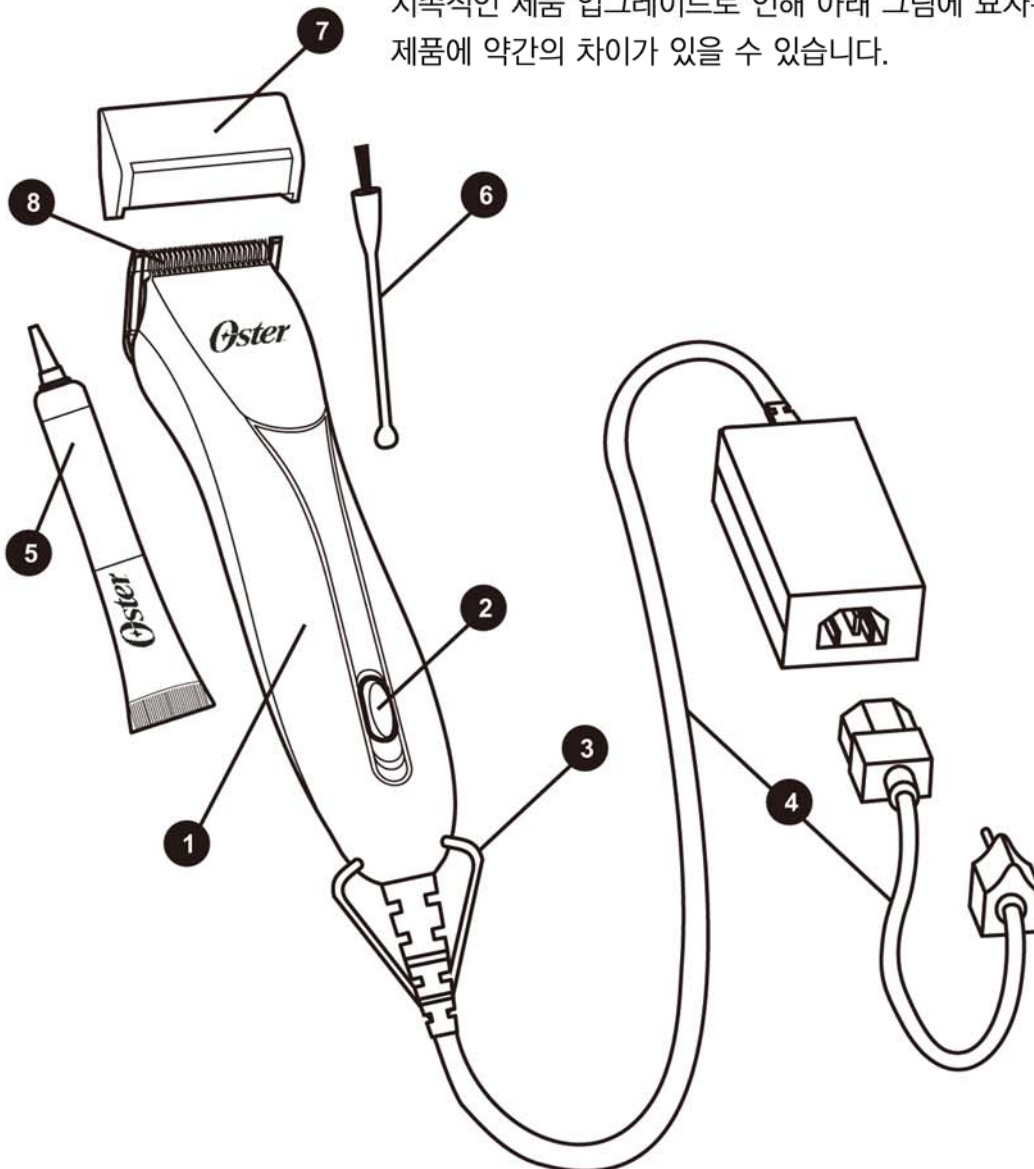


이발기 관리하기

Note: 본 설명서에 나오지 않는 유지보수의 경우 오스타 서비스센터에서 이루어져야 합니다.

Important: 부품을 제거, 교체 또는 세척하기 전 이발기의 전원이 꺼져있는지, 플러그가 콘센트에서 분리되어 있는지 확인하십시오.

이발기 본체에서 날 분리하기

- 1 이발기 뒷부분의 버튼을 누릅니다.
- 2 3 날을 아래 그림과 같이 뒤로 젖혀 밀어줍니다.
- 4 날을 아래서 위로 향해 분리해주십시오.

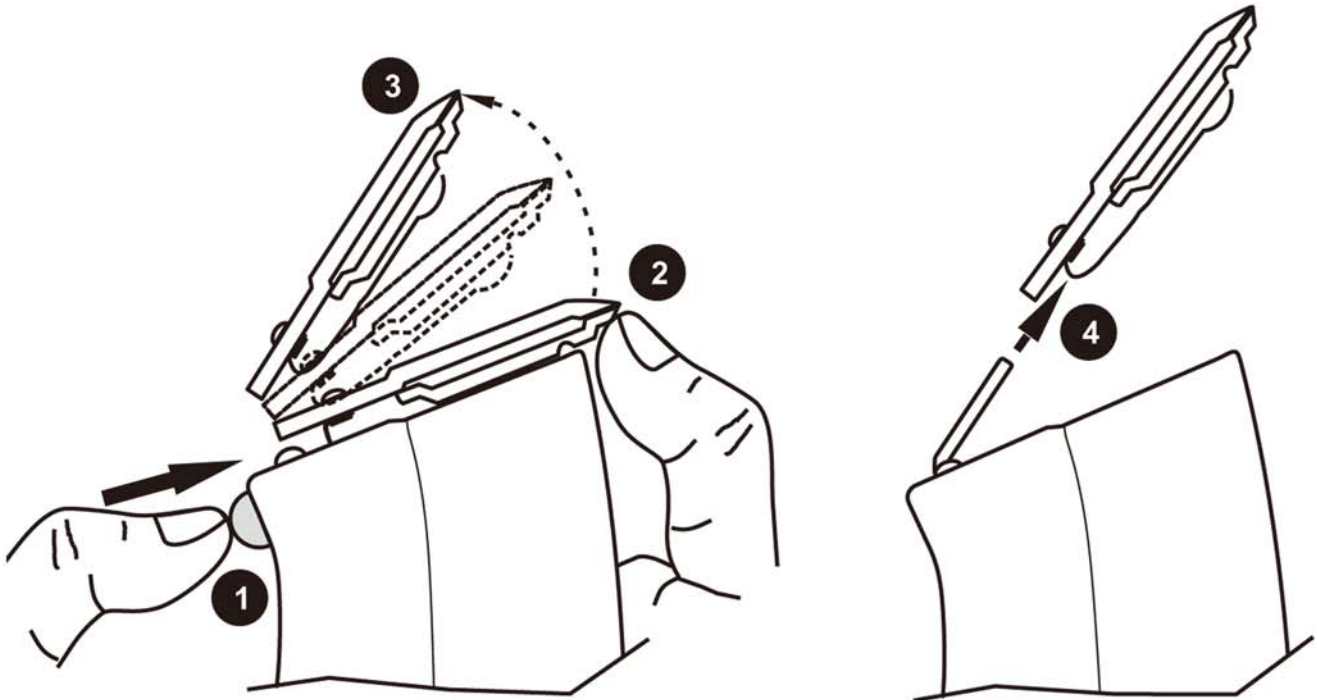

Step 1
78006 Model ONLY

WARNING



날을 끼울 때 날의 매끄러운 부분(번호와 제품 로고가 있는 면)이 바깥으로 향하도록 끼워주세요.

반대로 끼운 경우 이발기가 손상되거나 상처를 입을 수 있습니다.

날 관리하기

날 관리, 세척 및 오일칠하기

날은 주기적으로 오일을 발라 열기를 식히고 날카로움을 유지해주어야 합니다. 날을 분리하기 전에 열기가 식혀져 있는지 확인하십시오.

이발기의 전원이 꺼진 상태에서 오스타 전용 오일을 날 위에 1~2방울 떨어뜨려 발라줍니다. 과도한 오일은 마른헝겂으로 닦아주십시오.



세척

브러시를 이용해 날 사이에 낀 털을 제거해 주십시오.



유지 및 보수

날 관리, 세척 및 오일칠하기

날 세척을 위해 콘센트에서 플러그에 꽂은 뒤 전원을
켜주십시오.


얇은 그릇에 오스타 날 세척액을 부은 후 날의 이빨
부분만 담궈주십시오.

Caution: 이발기 본체를 담그지 않도록
주의하십시오.

이발기 날을 아래로 향한채로 세척액에서 꺼내어
마른헝겂으로 물기를 닦아주십시오.


세척 후에도 날이 잘 들지 않는다면 날 사이에 잔여
털이 끼었을 가능성이 있습니다.

이런 경우 날을 분리하십시오. 날의 나사를 풀지 않은
상태에서 아랫날을 한쪽으로 밀어 날 표면 사이사이를
마른헝겂으로 깨끗하게 닦아주십시오.

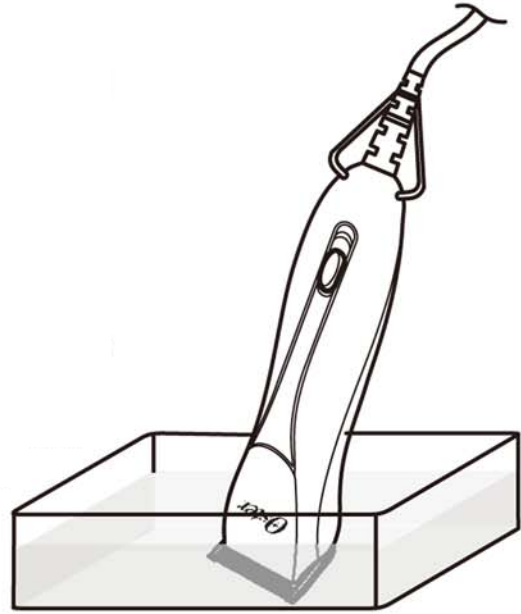

마른 상태의 날 표면과 슬라이드 가이드 홈에 오일을
떨어뜨린 후 아랫날을 양쪽으로 밀어주는 것을
반복합니다.

날을 본체에 다시 조립해주십시오. 오스타 전용
윤활제 또는 오일을 날에 발라주십시오.

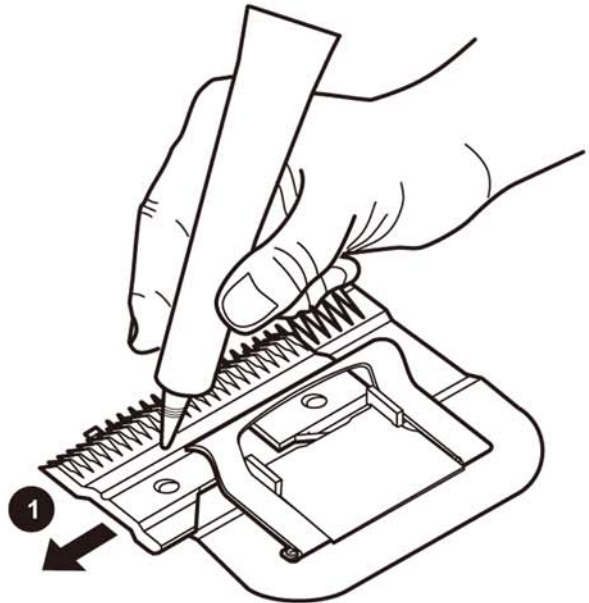

날 관리, 세척 및 오일칠하기

오스타 날은 움푹 hollow-ground(움푹 패인) 디자인으로 단단하여 수명이 긴 제품입니다. 어떤 날이든
수명이 다되면 날 끝이 둔해지므로 날을 갈 필요가 있을 경우 오스타 서비스센터에 문의하십시오.

이발기 보관

이발기는 깨끗하고 습기가 없는 곳에 보관하십시오. 보관하는 동안 전선이 영키지 않도록 주의하십시오.
전선을 이발기 본체에 감아놓지 마십시오. 전선에 손상을 일으킬 수 있습니다.

OsterTM
Professional Products

제조사: Jarden Consumer Solutions
150 Cadillac Road, McMinnville TN 31170 USA
TEL. 800-830-3678

수입판매원: (주)펫트코리아
경기도 성남시 수정구 금토동 64-1
TEL. 031-759-5395

오스타 A/S 문의

TEL. 031-763-6084

경기도 광주시 삼동 254-3 가동 2층